

To: 容副校長  
 鳳塘官立小學


峰力無線調頻系統 (FM System)  
操作指南 (用於學校)

峰力無線調頻系統(FM System)主要分兩部份：





- 1) 老師用的發射器連麥克風 (Transmitter with Microphone)
- 2) 學生用的接收器 (或+連接助聽器或人工耳蝸的配件如聲頻靴) (Receiver or Receiver + accessories e.g. Audio Shoe, CI adaptor etc)

發射器說明：

型號：Campus SX (是可轉換頻道的接收器 multi-frequency Transmitter)

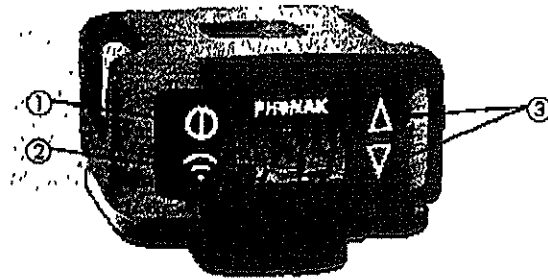


- ① 開/關按鈕
- ② 轉換接收器頻道按鈕
- ③ 頻道選擇按鈕

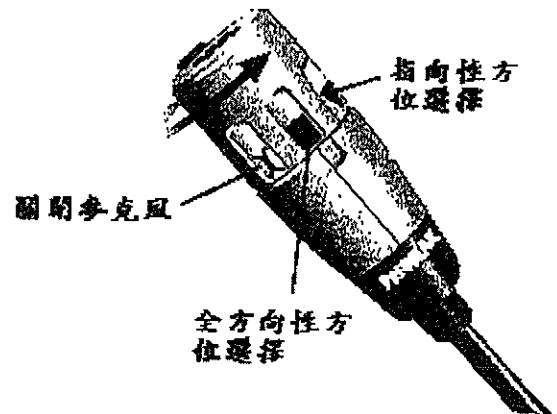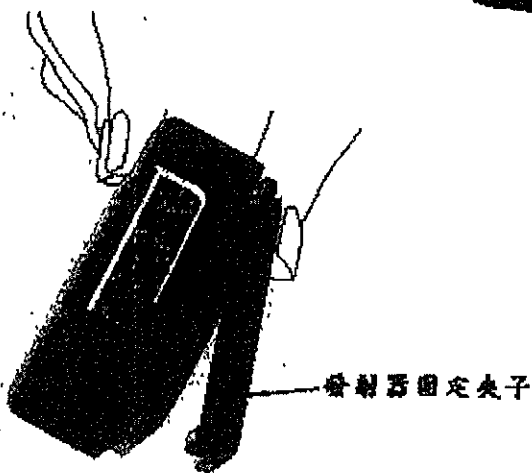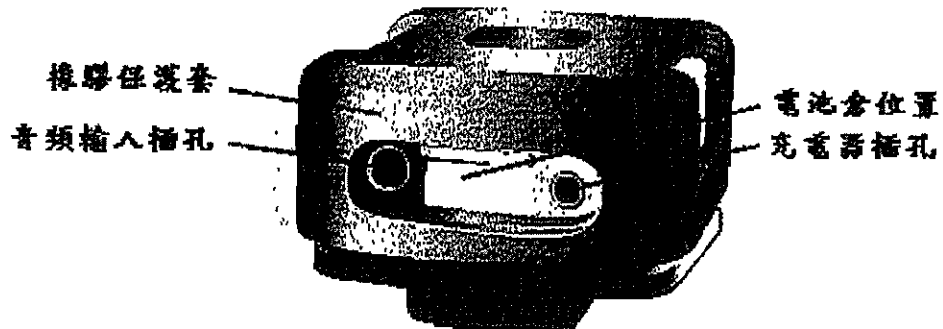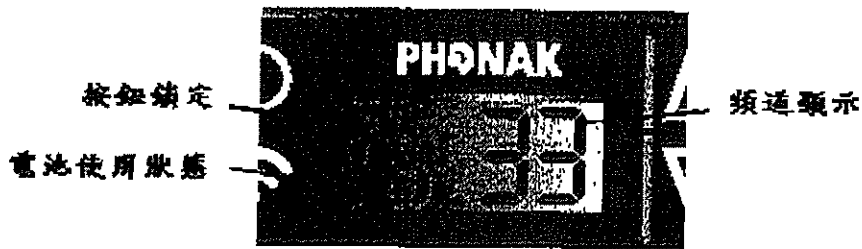

### 步驟：

1. 每早按 **①** **⑩** 約 2 秒開機，檢查是否在所選定的頻道 \_\_\_\_\_ (若不是選定之頻道，按 **③** **▲** 選回正確的頻道。)
2. 檢查電池是否有電，最好有三格，至少也要有兩格。
3. 檢查麥克風 (Mic) 有否關了，是否在正確的位置上，一般在全方向位置上 **▲**。
3. 為確保與接收器 (Receiver) 頻道一樣，最好與接收器近距離按 **②** **⑥** (距離在 1 米或 3 呎範圍內)，調節接收器的頻道，使它和發射器一樣。
4. 完成以上步驟後，把麥克風的接線拉出，伸展至最盡，因接線本身兼有天線功能，越伸展得長，接收距離越遠及越清晰。(訊號發射範圍室內為 30 呎，室外為 90 呎，發射範圍距離遠近會受電子設備影響。)
5. 把麥克風固定在距離老師嘴部約 6-8 吋位置的衣服或掛頸繩上，發射器可利用夾子安全地固定在皮帶或掛頸繩上。
6. 每次不用 FM 時，須把發射器關上。
7. 每日於放學後，必須給發射器充電，方法把充電器之接線圓頭一端插入發射器之紅色充電小孔上，充電器則插進電源掣上，通電後便進行充電，只須 4 個半鐘便能完全充滿電。可整晚充電，不會影響電池操作或壽命。(充滿電之電池可用 12 小時，常用之電池，壽命約一年。)
8. 以下為一些特別功能模式：

#### 按鈕鎖定模式

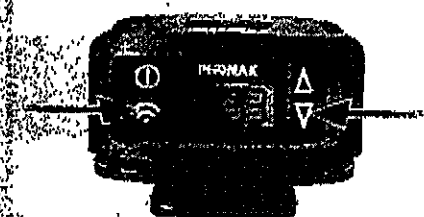

選用按鈕鎖定模式，只要將兩箭嘴指示的按鈕同時按下約 1 秒至 **■** 出現，上鎖後，所有按鈕不能按動。

**解鎖方法：**只要同時按箭嘴指示的按鈕約 1 秒直至 **■** 消失便可。


#### 麥克風暫時關閉模式



當老師想與其他老師交談時，又不便學生聽到，可選用麥克風暫時關閉模式，只要按 A 開關鍵直至 B 圖形 **■** 出現，麥克風便處於暫時關閉模式。

**解除方法：**只要再按 A 開關鍵直至所選頻道例如 **⑩** 再次出現便何。

#### 連接聲頻訊號輸入模式

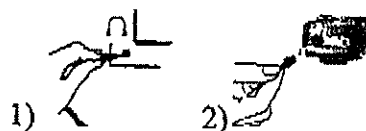

1) **1)** Campus SX 發射器可直接連接音響設備上例如電視機、CD、MP3 及電腦。


方法：選用配件聲頻輸入接線 audio cable，把接線的一端插入音響設備上的聽筒輸出插孔，如圖 1；而另外一端則插到發射器的聲頻訊號輸入小孔，如圖 2。學生便可直接收聽到電視機、CD、MP3 及電腦上的聲音。

接收器說明：

接收器上有3種圖示：


- (1) 空心圓點 = OFF 關閉接收器
- (2) 一點實心圓點 = 開啓接收器並只選 FM 功能, 即只接收發射器的訊息
- (3) 兩點實心圓點 = 開啓接收器並選 FM + Mic 功能, 即除接收發射器的訊息外, 並接收用者自己助聽器或人工耳蝸的訊息


\*備註：一般選用 (3), 即 FM+Mic 功能。

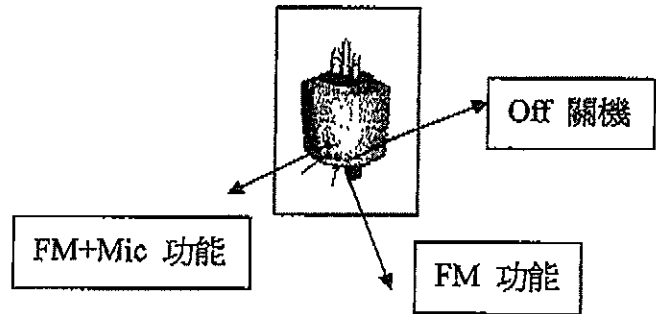

**接收器說明：**

型號：microLink ML8S 接收器 (只用在峰力 Claro & Perseo 助聽器之 Receiver)

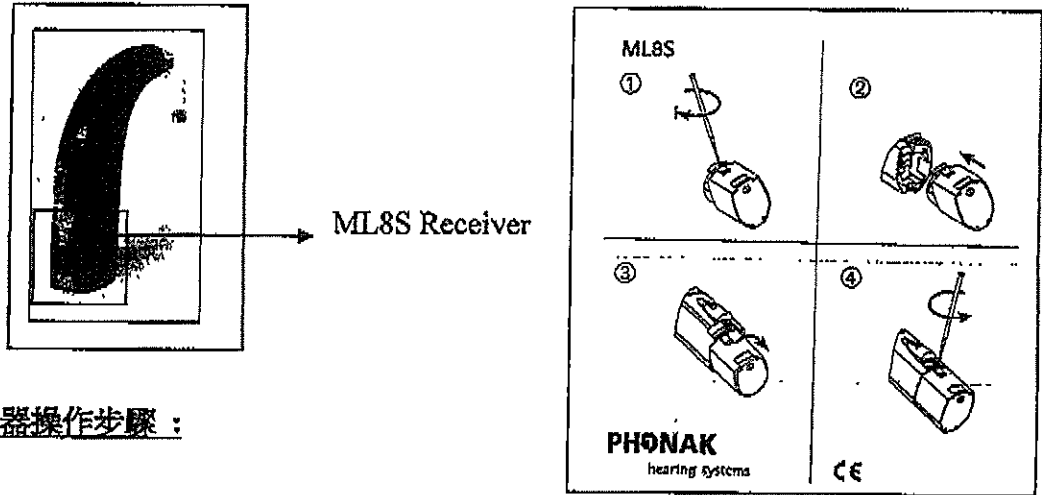**接收器操作步驟：****每早**

1. 每早除下學生用之助聽器後，把助聽器之底部蓋掩打開，拿走電池，然後除下蓋掩 (方法：向後拉)。
2. 把 ML8S 接收器套在助聽器上直至鎖定，然後打開底部蓋掩，放回電池。(請確保助聽器電池有電，因接收器會直接從助聽器取電，無電或電量不足均會影響接收效果，甚至接收不到)。
3. 開著助聽器 (方法：把助聽器開關掣向下推，直至看到綠色點)。
4. 再按開關掣一下，會聽到 DoDo 聲，這是助聽器在選定 FM+M 模式。
5. 為確保和發射器 (transmitter) 頻道一樣，最好再一次調節接收器的頻道。(方法：讓發射器近距離按 ，給接收器選定頻道。)
6. 最後，把已裝上接收器之助聽器給學生戴回耳上。

**每日放學後**

1. 每日放學後，打開接收器底部蓋掩，把電池取出。
2. 然後把接收器從助聽器上除下 (方法：一手拿著助聽器，一手拿著接收器，逆時針方向轉動直至接收器與助聽器分開)。
3. 放開後，套回原先除下的底部蓋掩，再放回電池，然後把助聽器交回給學生。